

4

Primi passi con DIABASS® PRO

DIABASS® PRO è un prodotto di mediaspects GmbH
Postfach 10 07 31, 72307 Balingen, Germania




Avviare DIABASS® PRO cliccando sul simbolo del desktop



L'elenco dei pazienti viene visualizzato automaticamente all'avvio e può essere richiamato in qualsiasi momento tramite il pulsante "AMMINISTRAZIONE" **A**.

Aprire un paziente esistente facendo doppio clic sull'elenco dei pazienti o creare un nuovo paziente utilizzando il pulsante corrispondente.

Si apre quindi l'area di valutazione, che visualizza gli ultimi 90 giorni con i valori registrati. Quest'ultima può essere richiamata in qualsiasi momento tramite il pulsante "ANALISI" **C**.

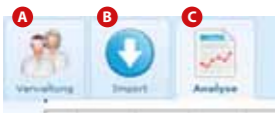

i Per leggere i dati da uno strumento di misura, cliccare sul pulsante IMPORTAZIONE **B**, selezionare il dispositivo desiderato dall'elenco facendo doppio clic su di esso e seguire le istruzioni per il trasferimento dati. Molti dispositivi vengono rilevati automaticamente quando sono collegati al PC.



- 1 - Il periodo di valutazione desiderato può essere comodamente limitato utilizzando la comoda barra di selezione
- 2 - Passare da una valutazione all'altra tramite **Linguette**
- 3 - Il simbolo può essere utilizzato per aprire una nuova scheda
- 4 - Usare il simbolo per aprire una finestra delle proprietà per personalizzare la visualizzazione
- 5 - Le **statistiche** sono anche disposte in linguette chiaramente disposte
- 6 - Sempre in vista: il **valore medio della glicemia** e il **valore HbA1c** calcolato degli ultimi 90 giorni

DIABASS® PRO

Un software per tutti gli strumenti di misura

QUICK GUIDE

Primi passi

A 118-031220 18-IT; Referenza fotografica: © ktsdesign - Fotolia.com



1

Configurazione iniziale su PC



La configurazione di **DIABASS® PRO** è assolutamente semplice e rapida. Non è richiesta alcuna conoscenza particolare del PC.

Avviare facendo doppio clic sul file **diabass6.exe** ricevuto su CD o tramite download. **DIABASS® PRO** si installerà quindi in modo completamente automatico, configura un simbolo sul desktop e si avvia.



Verrà quindi richiesto di attivare il software con un file di licenza valido.

Selezionare qui il file di licenza (estensione *.key) che avete ricevuto insieme al software e/o durante il download e poi confermare con OK.



Se si desidera utilizzare **DIABASS® PRO solo su una singola postazione di lavoro (cioè senza accesso alla rete), la configurazione è già completa.**

Si può quindi passare al **passo 3** (trasferimento dati **DIABASS®5**) o **passo 4** (primi passi)

2

Configurazione nella rete



Se si desidera utilizzare **DIABASS® PRO** nella rete, è necessario configurare una directory di database utilizzabile da tutte le postazioni di lavoro. Anche in questo caso, la configurazione è in gran parte automatica.



Cliccare in **DIABASS® PRO** sul pulsante **IMPOSTAZIONI**



Nella finestra che si apre, selezionare la linguetta "Sistema/Database" e poi cliccare su **MODIFICA IMPOSTAZIONI**



Si apre la finestra delle impostazioni di sistema. Selezionare il pulsante "**Crea nuovo database per accesso alla rete**"

È quindi possibile selezionare una directory di lavoro nella rete locale in cui archiviare i dati del paziente.



IMPORTANTE: selezionare una directory vuota a cui si possa accedere in modo identico su tutte le postazioni di lavoro o che sia mappata con la stessa lettera di unità (ad es. y:\daten\diabass)

Dopo alcuni secondi viene creata la struttura di directory richiesta. È stato generato un file di configurazione preconfigurato per ulteriori installazioni in rete.


3

Acquisire dati da **DIABASS® PRO**



Per acquisire i dati del paziente da una versione esistente di **DIABASS® PRO**, passare alla finestra delle impostazioni di sistema (cfr. passo 2). Quindi cliccare sul pulsante "**Assistente per acquisizione dati **DIABASS® PRO****". Quindi selezionare una directory con un database esistente e avviare l'acquisizione dati con "OK".

Dopo poco tempo i dati vengono convertiti nel nuovo formato di **DIABASS® PRO**.

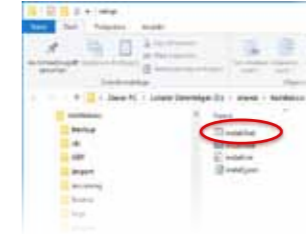

Per l'installazione su altre postazioni di lavoro in rete procedere come segue:

passare alla directory appena creata **DIABASS® PRO** sull'unità del server e aprire la sottocartella "setup", ad es. y:\daten\diabass\setup poi basta cliccare sul file **install.bat** per installare **DIABASS® PRO** nel giro di pochi secondi sulla postazione di lavoro. ripetere l'operazione su tutte le altre postazioni di lavoro su cui deve essere utilizzato **DIABASS® PRO**.



IMPORTANTE: la conversione non riguarda i dati esistenti. Così si possono acquisire i dati tranquillamente per "esercitarsi" e continuare a lavorare con la vecchia versione del programma fino alla conversione definitiva.

Prima della conversione definitiva, dovrebbe essere trasferito nuovamente il set di dati più recente.